Petunjuk Penggunaan Nesco Multicheck 1

Daftar Isi

Untuk NESCO MultiCheck 1 apa sistem Nesco GCUHB?
Informasi penting
Item dalam Paket
Barang Perlu Dibeli Secara terpisah
Mengenal system pemantaua multi fungsi NESCO MultiCheck 1 GCUHB Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin
NESCO MultiCheck 1 Tes Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin
Menyiapkan Sistem Pemantauan NESCO MultiCheck 1 Multi Fungsi GCUHB Anda
- Pengaturan Tanggal dan Waktu
- Memeriksa Unit Pengukuran
- Instalasi Baterai
- Menggunakan Strip Periksa untuk Memeriksa Meteran

Periksa dengan Solusi Kontrol Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin
- Kapan Harus Menjalankan Kontrol Periksa dengan Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / Solusi Kontrol Hemoglobin
- Barang yang Anda Butuhkan
- Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Glukosa
- Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Kolesterol
- Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Asam Urat.
- Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Hemoglobin.
- Bagaimana Cara Membaca Label pada Test Strip Vial?
- Menganalisis Hasil Kontrol Anda

Test Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin
- Item Pengujian Yang Anda Butuhkan
- Mempersiapkan Puncturer (Perangkat Lancing)

Struktur Puncturer dan Lancet.
Langkah-langkah untuk Menggunakan Puncturer
Menguji Tingkat Glukosa Darah Anda
Memahami Glukosa Darah Anda
Hasil Tes Menguji Tingkat Kolesterol Darah Anda.
Memahami Hasil Tes Kolesterol Darah Anda.
Menguji Tingkat Asam Urat Darah Anda
Memahami Hasil Tes Asam Urat Darah Anda.
Menguji Tingkat Hemoglobin Darah Anda
Memahami Hasil Tes Hemoglobin Darah Anda
Menggunakan Memori Meter
Tinjau Hasil Tes Glukosa Tersimpan
Tinjau Hasil Tes Kolesterol Tersimpan
Tinjau Hasil Tes Asam Urat Tersimpan
Tinjau Hasil Tes Hemoglobin Tersimpan
Menghapus Memori Stored Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin Hasil Tes
Merawat Meteran Anda
Memelihara Meter
Penggantian Baterai
Membersihkan Meteran
Panduan mengatasi masalah
Spesifikasi
Layanan pelanggan
Pelabelan dan Informasi

Untuk apa sistem NESCO MultiCheck 1 GCUHB?

- Sistem Pemantauan NESCO MultiCheck 1 Multi-Fungsi Asam / Hemoglobin swa-uji dirancang hanya untuk penggunaan diagnostik in-vitro (hanya untuk pemakaian luar). Sistem ini untuk para profesional kesehatan dan orang-orang dengan diabetes, hiperkolesterolemia, hiperurisemia atau anemia untuk mengukur kadar glukosa, kolesterol, asam urat dan hemoglobin dalam darah segar kapiler segar dari batang jari secara kuantitatif. Pemantauan glukosa darah, kolesterol, asam urat, dan hemoglobin yang rutin adalah tambahan untuk perawatan penderita diabetes, hiperkolesterolemia, hiperurisemia, dan anemia. Cukup berikan setetes darah ke strip tes, hasil tes akan ditampilkan di layar setelah 10 detik untuk glukosa, 150 detik untuk kolesterol, 20 detik untuk asam urat dan 6 detik untuk hemoglobin. GCUHB Glukosa Darah / Kolesterol / Uric
- NESCO MultiCheck 1 Sistem ini cocok untuk diabetes, hiperkolesterolemia, hiperurisemia, dan manajemen anemia di rumah atau penggunaan professional
- Meteran NESCO MultiCheck 1 GCUHB hanya dapat digunakan dengan NESCO MultiCheck 1 Tes Glukosa Darah, Kolesterol, Asam Urat, dan Hemoglobin. Penggunaan strip tes lain dapat memberikan hasil yang salah.
- Sebelum menggunakan produk untuk menguji kadar glukosa darah, kolesterol, asam urat dan hemoglobin Anda, baca semua instruksi dengan seksama. Ini mencakup semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan pembacaan glukosa darah, kolesterol, asam urat, dan hemoglobin yang akurat.
- Jangan mengubah rencana medis Anda tanpa persetujuan dokter. Sistem NESCO MultiCheck 1 GCUHB tidak boleh digunakan untuk diagnosis diabetes, hiperkolesterolemia, hiperurisemia dan anemia atau untuk tes bayi baru lahir.

Informasi Penting

- Spesimen darah yang mengandung asam askorbat (Vitamin C) lebih besar dari 5mg / dL, asam urat lebih besar dari 20mg / dL, asetaminofen lebih besar dari 15mg / dL, L-Dopa lebih besar dari 1,25 mg / dL, Dopamin lebih besar dari 3 mg / dL, Metil Dopa lebih besar dari 5 mg / dL, Glibenclimide lebih besar dari 10 mg / dL, kreatinin lebih besar dari 20 mg / dL dan Billirubin lebih besar dari 20 mg / dL dapat memberikan hasil glukosa yang tidak akurat.
- Spesimen darah yang mengandung asam askorbat (Vitamin C) lebih besar dari 5mg / dL, asetaminofen lebih besar dari 15mg / dL, L-Dopa lebih besar dari 1,25 mg / dL, Dopamin lebih besar dari 3 mg / dL, Metil-Dopa lebih besar dari 5 mg / dL, Glibenclimide lebih besar dari 10 mg / dL, kreatinin lebih besar dari 20 mg / dL dan Billirubin lebih besar dari 20 mg / dL dapat memberikan hasil kolesterol yang tidak akurat.
- Spesimen darah yang mengandung asam askorbat (Vitamin C) lebih besar dari 5mg / dL, asetaminofen lebih besar dari 15mg / dL, L-Dopa lebih besar dari 1,25 mg / dL, Dopamin lebih besar dari 3 mg / dL, Metil-Dopa lebih besar dari 5 mg / dL, Glibenclimide lebih besar dari 10 mg / dL, kreatinin lebih besar dari 20 mg / dL dan Billirubin lebih besar dari 1,85 mg / dL dapat memberikan hasil asam urat yang tidak akurat.
- Spesimen darah yang mengandung asam askorbat (Vitamin C) lebih besar dari 150 mg / dL, L-Dopa lebih besar dari 20 mg / dL, Dopamin lebih besar dari 20 mg / dL dan Metil-Dopa lebih dari 4 mg / dL dapat memberikan hasil hemoglobin yang tidak akurat.
- Kolesterol hingga 500 mg / dL atau trigliserida hingga 3000 mg / dL tidak secara signifikan mempengaruhi hasil glukosa. Sampel pasien lipaemia yang terlalu banyak belum diuji dan

tidak direkomendasikan untuk menguji kadar glukosa dengan Sistem NESCO MultiCheck 1 GCUHB.

- Hematokrit (persentase sel darah merah dalam darah Anda) di bawah 30% atau lebih tinggi dari 55% ditemukan menyebabkan pembacaan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada efek signifikan pada pembacaan ditemukan untuk hematokrit dalam sampel darah antara 30% dan 55%.
- Sistem pemantauan tidak akan berfungsi dengan baik pada ketinggian lebih dari 8.000 kaki.
- Sistem ini dirancang untuk digunakan pada suhu antara 57,2 ° F dan 104 F (14 ° C dan 40 ° C) dan di bawah 85% kelembaban relatif. Jika Anda menggunakan sistem di luar kondisi yang diusulkan, itu dapat memberikan hasil yang salah.
- Pastikan untuk menyimpan strip uji antara 40 ° F dan 86 ° F (4 ° C dan 30 C) dan hindari sinar matahari langsung.
- Pastikan untuk mengikuti peraturan setempat Anda untuk pembuangan strip tes dan lancet yang digunakan dengan benar.
- Jangan gunakan meter ini di lingkungan yang kering, terutama jika ada bahan sintetis. Pakaian sintetis, karpet, dll., Dapat menyebabkan kerusakan muatan statis di lingkungan yang kering.
- Jangan gunakan meteran ini di dekat telepon seluler atau nirkabel, walkie talkie, pembuka pintu garasi, pemancar radio, atau peralatan listrik atau elektronik lainnya yang merupakan sumber radiasi elektromagnetik, karena ini dapat mengganggu pengoperasian meter dengan benar.

Item dalam Paket


- NESCO MultiCheck 1 GCUHb Meter
- Lancing Device
- Lancets
- Tas
- Petunjuk penggunaan NESCO MultiCheck 1 GCUHb
- Buku Catatan
- periksa strip
- 2 battre AAA

Barang Perlu Dibeli Secara terpisah


- NESCO MultiCheck 1 glukosa darah, kolesterol, asam urat dan strip tes hemoglobin (dilengkapi dengan kode kunci)
  - Strip glukosa
  - Strip kolesterol
  - Strip asam urat
  - Strip hemoglobin

- NESCO MultiCheck 1 GCUHB glukosa, kolesterol, asam urat dan solusi kontrol hemoglobin
  - 3ml untuk glukosa
  - 1ml untuk kolesterol
  - 3ml untuk asam urat
  - 1ml untuk hemoglobin

Mengenal system pemantaua multi fungsi NESCO MultiCheck 1 GCUHB Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin

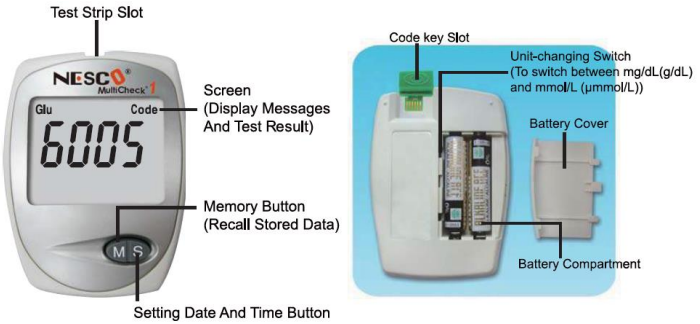

NESCO MultiCheck 1 Tes Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin

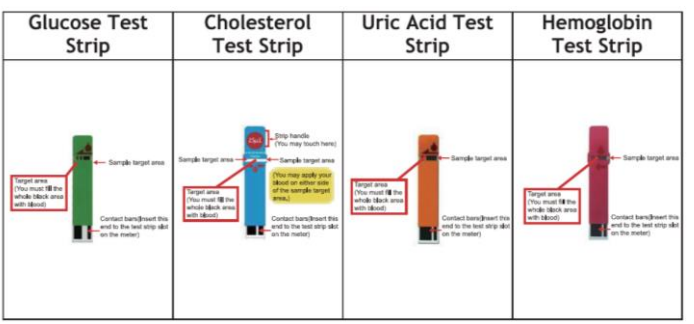

Menyiapkan Sistem Pemantauan NESCO MultiCheck 1 Multi Fungsi GCUHB Anda

Pengaturan Tanggal dan Waktu

CATATAN: Saat Anda memasang baterai ke meter setiap kali atau mengganti baterai, meter akan masuk ke mode pengaturan secara otomatis. Anda dapat mengatur waktu dan tanggal yang benar sebelum memulai pengujian.

1. Meteran akan secara otomatis memasuki mode pengaturan setelah Anda memasang baterai.
2. Tekan tombol "S" untuk mendapatkan nomor yang benar.
3. Tekan tombol "M" untuk mengonfirmasi pengaturan dan beralih ke pengaturan bulan.
4. Ulangi langkah yang sama untuk mengatur bulan, tanggal, jam dan menit.
5. Ketika Anda menyelesaikan pengaturan, meteran akan mati secara otomatis.

Memeriksa Unit Pengukuran

Sebelum memulai NESCO MultiCheck 1 GCUHB meter dapat mengukur glukosa darah, kolesterol, asam urat, dan hemoglobin Anda dalam satuan seperti dijelaskan di bawah ini:

	 Tekan saklar Atas		 Tekan saklar bawah	
	Unit	Titik desimal	Unit	Titik desimal
Glukosa	Mmol/L	Ya	mg/dL	Tidak
Kolesterol	Mmol/L	Ya	mg/dL	Tidak
Asam urat	Mmol/L	Tidak	mg/dL	Ya
Hemoglobin	Mmol/L	Ya	g/dL	Ya

- Anda harus memeriksa pengaturan ini setiap kali Anda memasukkan baterai ke meteran Anda.
- Gunakan obeng untuk menyesuaikan sakelar

Instalasi Baterai

CATATAN: Meter Anda dilengkapi dengan dua baterai ukuran AAA (1.5V).



1. Geser penutup baterai dari bagian belakang meter.
2. Masukkan dua baterai ukuran AAA (1.5V) ke dalam slot baterai.
3. Geser penutup baterai kembali.

PERHATIAN:

- Pastikan ujung "+" dan "-" baterai sesuai dengan tanda di kompartemen baterai.
- Selalu ganti kedua baterai secara bersamaan. Kedua baterai harus memiliki merek yang sama

Menggunakan Strip Periksa untuk Memeriksa Meteran

Anda harus menggunakan strip periksa untuk memeriksa meteran kapan

- Anda menggunakan sistem pemantauan NESCO MultiCheck 1 GCUHB untuk pertama kalinya
- Anda menjatuhkan meteran
- Anda berpikir ada sesuatu yang salah dengan hasil yang Anda dapatkan dan Anda ingin memeriksa apakah meter dan strip tes berfungsi dengan benar atau tidak.



1. Masukkan strip periksa ke dalam slot strip tes pada meteran. Jika "X"
2. Layar akan menampilkan "OK". muncul di layar, hapus tanda centang dan masukkan kembali. Jika "X" muncul lagi, hentikan tes dan hubungi dukungan pelanggan kami.

Kontrol Periksa dengan Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / Solusi Kontrol Hemoglobin

Kapan Harus Menjalankan Pemeriksaan Kontrol dengan Solusi Kontrol Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin?

- Anda pikir ada sesuatu yang salah dengan pengukuran glukosa, kolesterol, asam urat atau hemoglobin yang Anda dapatkan dan Anda ingin memeriksa apakah meter dan strip tes berfungsi dengan benar.

Barang yang Anda Butuhkan

- NESCO MultiCheck 1 GCUHB Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / solusi kontrol Hemoglobin
- GCUHB Meter
- NESCO MultiCheck 1 Tes Glukosa Darah Strip Darah
- NESCO MultiCheck 1 Tes Kolesterol
- NESCO MultiCheck 1 Tes Asam Urat
- NESCO MultiCheck 1 Tes Hemoglobin
- Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / Kode Hemoglobin kunci dalam kotak strip tes

Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Glukosa

PERINGATAN:

- Selalu periksa nomor kunci kode glukosa untuk memastikannya cocok dengan nomor yang tertera pada botol strip tes ketika Anda menjalankan tes kontrol glukosa. Kalau tidak, Anda mungkin mendapatkan hasil yang salah.
- Selalu tulis tanggal pembukaan vial larutan kendali glukosa dan vial strip uji Anda. Keduanya baik hanya untuk 3 bulan setelah pembukaan pertama atau sampai tanggal kedaluwarsa, mana yang lebih dulu.
- Hasilnya akan disimpan dalam memori dan muncul seperti hasil glukosa darah.

1. Masukkan kode kunci dengan strip tes glukosa ke dalam slot kode kunci di bagian belakang Glu Code 6005 meter.




2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat.
3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meter pertama akan menampilkan nomor kode, lalu simbol darah "🩸".

Perhatian:
Pastikan bahwa nomor kode yang ditampilkan di layar sama dengan nomor kode yang tercetak pada botol strip tes glukosa, jika tidak, Anda mungkin mendapatkan pengukuran yang salah

4. Pegang botol larutan kontrol glukosa secara terbalik, tekan botol perlahan-lahan untuk membentuk setetes kecil, buang tetes pertama larutan, biarkan tetes kedua menyentuh tepi area penargetan sampel pada strip uji. Solusi kontrol akan ditarik ke zona penargetan secara otomatis.



5. Anda akan mendengar suara "Bip". Tutup penutup solusi kontrol segera. Meter mulai menghitung mundur 10 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layar,



6. Periksa apakah nilai glukosa yang ditampilkan termasuk dalam kisaran yang dapat diterima ditunjukkan pada vial strip uji.



7. Lepaskan strip uji dari meteran dan buang.

Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Kolesterol

PERINGATAN:

- Selalu periksa nomor kunci kode Kolesterol untuk memastikannya cocok dengan nomor yang tertera pada botol strip tes ketika Anda menjalankan tes kontrol Kolesterol. Kalau tidak, Anda mungkin mendapatkan hasil yang salah.
- Selalu tuliskan tanggal pembukaan vial larutan kontrol Kolesterol Anda dan test strip vial. Keduanya baik hanya untuk 2 bulan setelah pembukaan pertama atau sampai tanggal kedaluwarsa, mana yang lebih dulu.
- Hasilnya akan disimpan dalam memori dan muncul seperti hasil kolesterol darah.

1. Masukkan kunci kode kolesterol ke dalam slot kode kunci di bagian belakang CHOL Code 9005.



2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat.
3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meter pertama akan menampilkan nomor kode, lalu simbol darah "🩸".


Perhatian:
Pastikan nomor kode yang ditampilkan di layar sama dengan nomor kode yang tercetak pada botol strip Tes Kolesterol, jika tidak, Anda mungkin mendapatkan pengukuran yang salah.

4. Pegang botol larutan kontrol Kolesterol terbalik, tekan botol perlahan-lahan untuk membentuk setetes kecil, buang tetes larutan pertama, biarkan tetes kedua menyentuh tepi area penargetan sampel pada strip uji. Solusi kontrol akan ditarik ke zona penargetan secara otomatis.



5. Anda akan mendengar suara "Bip". Tutup penutup solusi kontrol segera. Meteran mulai menghitung mundur 150 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layer

6. Periksa apakah nilai kolesterol yang ditampilkan berada dalam kisaran yang dapat diterima yang ditunjukkan pada vial strip tes.
7. Lepaskan strip uji dari meteran dan buang.

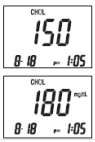

Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Asam Urat

PERINGATAN:

• Selalu periksa nomor kunci kode Asam Urat untuk memastikannya cocok dengan nomor yang tertera pada botol strip tes ketika Anda menjalankan tes kontrol Asam Urat. Kalau tidak, Anda mungkin mendapatkan hasil yang salah.

• Selalu tuliskan tanggal pembukaan vial larutan kontrol Asam Urat Anda dan vial strip tes. Keduanya baik hanya untuk 2 bulan setelah pembukaan pertama atau sampai tanggal kedaluwarsa, mana yang lebih dulu.

• Hasilnya akan disimpan dalam memori dan muncul seperti hasil asam urat darah.

1. masukkan kunci kode asam urat ke slot kunci kode di bagian belakang meter.
2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat.
3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meter pertama akan menampilkan nomor kode, kemudian simbol darah "🩸".



Perhatian:


Pastikan nomor kode yang ditampilkan di layar sama dengan nomor kode yang tercetak pada tabung strip Asam Urat, jika tidak, pengukuran Anda mungkin salah.

4. Pegang botol larutan kontrol Asam Urat terbalik, tekan botol perlahan-lahan untuk membentuk setetes kecil, buang tetes larutan pertama, biarkan tetes kedua menyentuh tepi area penargetan sampel



pada strip uji. Solusi kontrol akan ditarik ke zona penargetan secara otomatis,

5. Anda akan mendengar suara "Bip". Tutup penutup solusi kontrol segera. Meter mulai menghitung mundur 20 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layar.

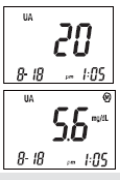

6. Periksa apakah nilai asam urat yang ditampilkan berada dalam kisaran yang dapat diterima yang ditunjukkan pada vial strip uji.
7. Lepaskan strip uji dari meteran dan buang.

Langkah-langkah untuk Menjalankan Pemeriksaan Kontrol Hemoglobin

PERINGATAN:

• Selalu periksa nomor kunci kode Hemoglobin untuk memastikannya cocok dengan nomor yang tertera pada botol strip tes ketika Anda menjalankan tes kontrol hemoglobin. Kalau tidak, Anda mungkin mendapatkan hasil yang salah.

• Selalu tuliskan tanggal pembukaan vial larutan kontrol hemoglobin Anda dan vial strip tes. Strip tes hemoglobin baik hanya untuk 2 bulan dan solusi kontrol hemoglobin baik untuk hanya 1 bulan setelah pembukaan pertama atau sampai tanggal kedaluwarsa, mana yang lebih dulu.

• Hasilnya akan disimpan dalam memori dan muncul seperti hasil hemoglobin darah

1. Masukkan kunci kode hemoglobin ke dalam slot kunci kode di bagian belakang meter.



2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat.
3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meteran pertama akan menampilkan nomor kode, lalu simbol darah "🩸".

Perhatian:

Pastikan nomor kode yang diperlihatkan di layar sama dengan nomor kode yang tercetak pada tabung strip Hemoglobin, jika tidak, pengukuran Anda mungkin salah.


4. Pegang botol larutan kontrol hemoglobin terbalik, tekan botol perlahan-lahan untuk membentuk setetes kecil, buang tetes larutan pertama, biarkan tetes kedua menyentuh tepi area target sampel pada strip uji. Solusi kontrol akan ditarik ke zona target secara otomatis.
5. Anda akan mendengar suara "Bip". Tutup penutup solusi kontrol segera. Meteran mulai menghitung mundur 6 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layar.
6. Periksa apakah nilai Hemoglobin yang ditampilkan berada dalam kisaran yang dapat diterima yang ditunjukkan pada tabung strip uji.
7. Lepaskan strip uji dari meteran dan buang.





Bagaimana Cara Membaca Label pada Test Strip Vial?

Label pada Glucose Test Strip Vial

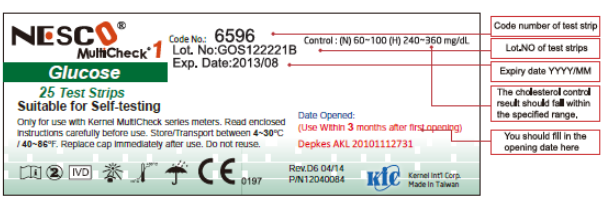


Label pada Kolesterol Test Strip Vial



Label pada asam urat Test Strip Vial



Label pada Hemoglobin Test Strip Vial

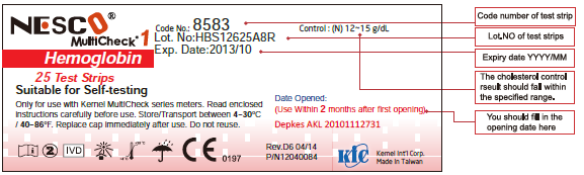

Menganalisis Hasil Kontrol Anda

Anda akan menemukan kisaran kadar glukosa, kolesterol, asam urat, dan hemoglobin yang dapat diterima untuk kontrol normal dan tinggi pada label vial strip tes.

Jika hasil kontrol Anda berada dalam kisaran yang dapat diterima, Anda dapat mulai menguji kadar glukosa darah, kolesterol, asam urat atau hemoglobin Anda. Jika hasil kontrol Anda tidak dalam rentang yang dapat diterima, periksa item berikut:

- Apakah strip uji Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin atau solusi kontrol Anda sudah kadaluwarsa?
- Apakah Anda pernah lupa untuk menutup tabung strip Glukosa / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin atau botol larutan kontrol Anda?
- Apakah kode dalam meter cocok dengan kode pada vial strip uji? Apakah Anda mengikuti semua instruksi operasi dengan benar?
- Ulangi tes kontrol dengan strip tes baru, ikuti langkah-langkahnya dengan tepat.

PERINGATAN:
Jika Anda terus menerima nilai kontrol yang berada di luar rentang yang diterima, hentikan tes darah Anda dan segera hubungi Layanan Pelanggan atau penyedia layanan kesehatan Anda.


Tes Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin

Barang yang Anda Butuhkan


- NESCO MultiCheck 1 GCUHB Meter
- NESCO MultiCheck 1 Strip Tes Glukosa Darah

- NESCO MultiCheck 1 Strip Tes Kolesterol Darah
- NESCO MultiCheck 1 Strip Tes Asam Urat Darah
- NESCO MultiCheck 1 Strip Tes Hemoglobin Darah
- Kunci Kode Glukosa (warna hijau) dalam kotak strip tes glukosa
- Kunci Kode Kolesterol (warna biru) dalam kotak strip tes kolesterol
- Kunci Kode Asam Urat (warna oranye) dalam kotak strip tes asam urat
- Kunci kode Hemoglobin (warna merah muda) dalam kotak strip tes hemoglobin
- Penusuk
- Lancet
- Alkohol swab (tidak termasuk)
- Buku log


struktur puncturer dan lancet

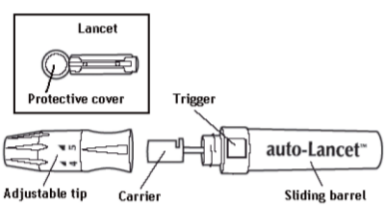


langkah untuk menggunakan puncturer

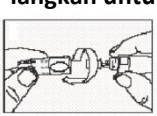


1. Buka dan lepaskan ujung penutup lancing

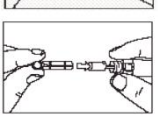


2. Masukkan lancet ke dalam lancing

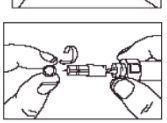


3. Putar tutup pelindung.

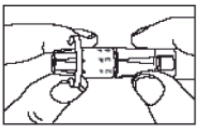

4. Pasang kembali ujung yang bisa disetel dengan erat. Pilih kedalaman penetrasi kulit yang diinginkan dengan memutar bagian atas dari ujung yang dapat disesuaikan sampai nomor pengaturan sejajar dengan panah. Pengaturan didasarkan pada jenis kulit:
Kedalaman 1-2: untuk kulit lunak atau kurus
Kedalaman 3: untuk kulit rata-rata
Kedalaman 4-5: untuk kulit tebal atau kapalan

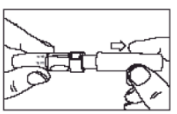

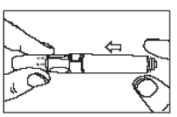

5. Pegang ujung puncturer dengan satu tangan dan tarik laras geser dengan tangan lainnya. Ketika klik dirasakan, pemicu naik. Lepaskan laras geser, itu akan bergerak kembali ke posisi semula.

Menguji Tingkat Glukosa Darah Anda

PERHATIAN:
Anda hanya dapat menggunakan NESCO MultiCheck 1 strip tes glukosa darah dan memeriksa strip pada NESCO MultiCheck 1 meteran GCUHB.




1. Saat Anda pertama kali menggunakan NESCO MultiCheck 1 meteran GCUHB atau membuka vial strip tes baru, masukkan kunci kode dari vial strip tes. Setiap tabung strip berisi satu kunci kode. Pastikan nomor pada kunci kode cocok dengan nomor kode pada botol strip tes yang Anda gunakan
2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat.


Peringatan:
Strip uji bisa rusak ketika tidak ditutup dan disimpan dengan benar



3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meter pertama akan menampilkan nomor kode, lalu simbol darah "🩸".

4. Saat layar menunjukkan simbol darah "🩸", bersihkan jari Anda dengan alkohol. Biarkan hingga benar-benar kering.
5. Tempatkan puncturer di jari Anda.

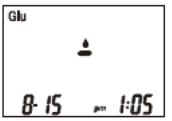

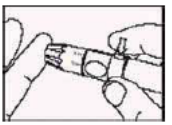

CATATAN: Tempat tusukan terbaik ada di sisi ujung jari, karena memiliki suplai darah terbaik.

6. Tekan pelatuk pada puncturer.
7. Angkat puncturer.
8. Dapatkan setetes darah.
9. Letakkan tetesan darah di satu sisi atau sisi lain dari area target strip tes. Darah akan diserap dan menyebabkan area target menjadi merah. Reaksi pengujian dimulai ketika meter berbunyi bip. Meter mulai menghitung mundur 10 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layar. Meteran menyimpan hasil Anda dalam memori secara otomatis.






CATATAN:


Berapa banyak darah yang harus diterapkan? Meskipun hanya dibutuhkan sedikit darah, sangat penting bagi Anda untuk memasukkan cukup darah pada strip tes Anda sehingga seluruh zona reaksi tertutupi oleh darah. Ini memastikan bahwa meteran Anda dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.



Peringatan:
Jika Anda tidak memberikan cukup darah, Anda mungkin perlu menggunakan strip tes baru untuk melakukan tes lagi.

10. Dalam waktu sekitar 10 detik, layar akan menampilkan nilai glukosa yang diukur. Catat nilai glukosa dalam buku catatan Anda.
11. Tarik strip uji dari meter. Meteran akan mati dengan sendirinya. Lepaskan ujung tusukan yang dapat disesuaikan.
12. Pasang kembali tutup pelindung lancet pada lancet. Pegang dudukan tusukan dengan kuat dan tarik keluar lanset.
13. Buang lancet bekas dalam wadah yang sesuai dengan tutupnya.
14. Pasang kembali ujung yang bisa disetel pada tusukan.

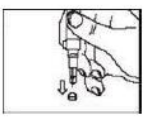

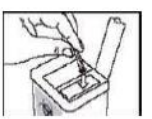

PERINGATAN:
Untuk menghindari cedera yang tidak disengaja, jangan tinggalkan lanset di puncturer. Selalu lancet bekas segera setelah setiap tes.

Memahami Hasil Tes Glukosa Darah Anda

Menurut saran dari American Diabetes Association: Glukosa darah puasa normal adalah 70 ~ 100 mg / dL (3,9-5,6 mmol / L). Namun, rentang di atas hanyalah referensi, dan mungkin tidak berlaku untuk setiap orang.

Konsultasikan dengan dokter Anda untuk kisaran yang sesuai untuk Anda.

Menguji Tingkat Kolesterol Darah Anda

PERHATIAN:

Anda hanya dapat menggunakan NESCO MultiCheck 1 strip tes kolesterol darah dan memeriksa strip pada meteran GCUHB NESCO MultiCheck 1

1. Saat Anda pertama kali menggunakan meteran NESCO MultiCheck 1 GCUHB atau membuka vial strip tes baru, masukkan kunci kode dari vial strip tes. Setiap tabung strip berisi satu kunci kode. Pastikan nomor pada kunci kode cocok dengan nomor kode pada botol strip tes yang Anda gunakan.
2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat.


Peringatan:

Strip uji bisa rusak ketika tidak ditutup dan disimpan dengan benar


3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meter pertama akan menampilkan nomor kode, lalu simbol darah "🩸".



4. Saat layar menunjukkan simbol darah "🩸", bersihkan jari Anda dengan alkohol. Biarkan hingga benar-benar kering.
5. Tempatkan puncturer di jari Anda.

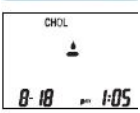

CATATAN: Tempat tusukan terbaik ada di sisi ujung jari, karena memiliki suplai darah terbaik.

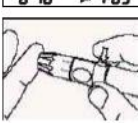

6. Tekan pelatuk pada puncturer.
7. Angkat puncturer.
8. Dapatkan setetes darah.

9. Letakkan tetesan darah di satu sisi atau sisi lain dari area target strip tes. Darah akan diserap dan menyebabkan area target menjadi merah. Reaksi pengujian dimulai ketika meter berbunyi bip. Meter mulai menghitung mundur 150 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layar. Meteran menyimpan hasil Anda dalam memori secara otomatis.








CATATAN:

Berapa banyak darah yang harus diterapkan? Meskipun hanya dibutuhkan sedikit darah, sangat penting bagi Anda untuk memasukkan cukup darah pada strip tes Anda sehingga seluruh zona reaksi tertutupi oleh darah. Ini memastikan bahwa meteran Anda dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

Contoh:


Volume darah yang dibutuhkan dalam tes kolesterol lebih dari itu dalam tes glukosa. Anda perlu

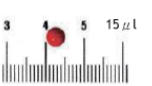


Peringatan:

Jika Anda tidak memberikan cukup darah, Anda mungkin perlu menggunakan strip tes baru untuk melakukan tes lagi.

10. Dalam waktu sekitar 150 detik, layar akan menampilkan nilai kolesterol yang diukur. Catat nilai kolesterol dalam buku catatan Anda.
11. Tarik strip uji dari meter. Meteran akan mati dengan sendirinya. Buka tutup ujung puncturer yang dapat disesuaikan.

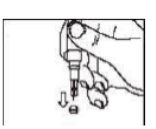

12. Pasang kembali tutup pelindung lancet pada lancet, Pegang pemegang puncturer dengan kuat dan tarik keluar lancet,
13. Buang lancet bekas dalam wadah yang sesuai dengan tutupnya.
14. Pasang kembali ujung yang bisa disetel pada puncturer.

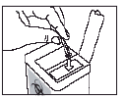

Memahami Hasil Tes Kolesterol Darah Anda

Kolesterol darah puasa normal di bawah 200 mg / dL.
Namun, rentang di atas hanyalah referensi, dan mungkin tidak berlaku untuk setiap orang.

Konsultasikan dengan dokter Anda untuk kisaran yang sesuai untuk Anda.

Menguji Tingkat Asam Urat Anda

PERHATIAN:
Anda hanya dapat menggunakan NESCO MultiCheck 1 strip tes Asam urat dan memeriksa strip pada meteran GCUHB NESCO MultiCheck 1


1. Saat Anda pertama kali menggunakan meteran NESCO MultiCheck 1 GCUHB atau membuka vial strip tes baru, masukkan kunci kode dari vial strip tes. Setiap tabung strip berisi satu kunci kode. Pastikan nomor pada kunci kode cocok dengan nomor kode pada botol strip tes yang Anda gunakan.
2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat




Peringatan:
Strip uji bisa rusak ketika tidak ditutup dan disimpan dengan benar

3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meter pertama akan menampilkan nomor kode, lalu simbol darah "🩸".
4. Saat layar menunjukkan simbol darah "🩸", bersihkan jari Anda dengan alkohol. Biarkan hingga benar-benar kering.
5. Tempatkan puncturer di jari Anda.



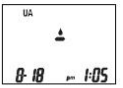

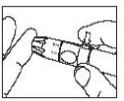

CATATAN:
Tempat tusukan terbaik ada di sisi ujung jari, karena memiliki suplai darah terbaik.

6. Tekan pelatuk pada puncturer.
7. Angkat puncturer.
8. Dapatkan setetes darah.
9. Letakkan tetesan darah di satu sisi atau sisi lain dari area target strip tes. Darah akan diserap dan menyebabkan area target menjadi merah. Reaksi pengujian dimulai ketika meter berbunyi bip. Meter mulai menghitung mundur 20 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layar. Meteran menyimpan hasil Anda dalam memori secara otomatis.









CATATAN:
Berapa banyak darah yang harus diterapkan? Meskipun hanya dibutuhkan sedikit darah, sangat penting bagi Anda untuk memasukkan cukup darah pada strip tes Anda sehingga seluruh zona reaksi tertutupi oleh darah. Ini memastikan bahwa meteran Anda dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

Peringatan:
Jika Anda tidak memberikan cukup darah, Anda mungkin perlu menggunakan strip tes baru untuk melakukan tes lagi.

10. Dalam sekitar 20 detik, layar akan menampilkan nilai asam urat yang diukur. Catat nilai asam urat di buku catatan Anda.
11. Tarik strip uji dari meter. Meteran akan mati dengan sendirinya. Buka tutup ujung puncturer yang dapat disesuaikan.
12. Pasang kembali tutup pelindung lancet pada lancet. Pegang dudukan penusuk dengan kuat dan tarik lancet keluar.

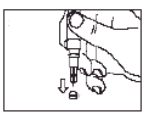

13. Buang lancet bekas dalam wadah yang sesuai dengan tutupnya.
14. Pasang kembali ujung yang bisa disetel pada puncturer.

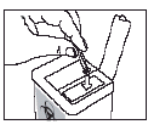

Memahami Hasil Tes Asam Urat Darah Anda

Nilai asam urat darah yang diharapkan adalah sebagai berikut:
Laki-laki: 3 - 7,2 mg / dL (179-428µmol / L)
Wanita: 2 - 6 mg / dL (119-357µmol / L) 50
Namun, rentang di atas hanyalah referensi, dan mungkin tidak berlaku untuk setiap orang.

Konsultasikan dengan dokter Anda untuk kisaran yang sesuai untuk Anda.

Menguji Tingkat Hemoglobin Darah Anda

PERHATIAN:

Anda hanya dapat menggunakan NESCO MultiCheck 1 strip tes hemoglobin darah dan memeriksa strip pada meter GCUHB NESCO MultiCheck 1




1. Saat pertama kali Anda menggunakan meteran GCUHB NESCO MultiCheck 1 atau membuka vial strip tes baru, masukkan kunci kode dari vial strip tes. Setiap tabung strip berisi satu kunci kode. Pastikan nomor pada kunci kode cocok dengan nomor kode pada botol strip tes yang Anda gunakan.
2. Ambil satu strip dari botol. Tutup botol dengan cepat.


Peringatan:

Strip uji bisa rusak ketika tidak ditutup dan disimpan dengan benar.



3. Masukkan strip uji ke dalam slot strip tes pada meteran. Meter pertama akan menampilkan nomor kode, lalu simbol darah "🩸".
4. Saat layar menunjukkan simbol darah "🩸", bersihkan jari Anda dengan alkohol. Biarkan hingga benar-benar kering.
5. Tempatkan puncturer di jari Anda.

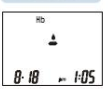

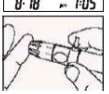

CATATAN:

Situs tusukan terbaik adalah di sisi ujung jari, karena memiliki pasokan darah terbaik.

6. Tekan pelatuk pada puncturer.
7. Angkat puncturer.
8. Dapatkan setetes darah.

9. Letakkan tetesan darah di area target strip tes. Darah akan diserap dan menyebabkan area target menjadi merah. Reaksi pengujian dimulai ketika meter berbunyi bip. Meteran akan mulai menghitung mundur 6 detik kemudian menunjukkan hasil Anda di layar. Meteran menyimpan hasil Anda dalam memori secara otomatis.









CATATAN:
Berapa banyak darah yang harus dioleskan? Meskipun hanya dibutuhkan sedikit darah, sangat penting bagi Anda untuk memasukkan cukup darah pada strip tes Anda sehingga seluruh zona reaksi tertutupi oleh darah. Ini memastikan bahwa meteran Anda dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

Peringatan:
Jika Anda tidak memberikan cukup darah, Anda mungkin perlu menggunakan strip tes baru untuk melakukan tes lagi.

10. Dalam waktu sekitar 6 detik, layar akan menampilkan nilai Hemoglobin yang diukur. Catat nilai Hemoglobin di buku catatan Anda.
11. Tarik strip uji dari meter. Meteran akan mati dengan sendirinya. Buka tutup ujung puncturer yang dapat disesuaikan.
12. Pasang kembali tutup pelindung lancet pada lancet. Pegang dudukan penusuk dengan kuat dan tarik lancet keluar.
13. Buang lancet bekas dalam wadah yang sesuai dengan tutupnya.
14. Pasang kembali ujung yang bisa disetel pada puncturer.

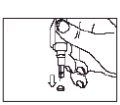

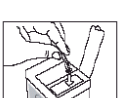

Memahami Hasil Tes Hemoglobin Darah Anda

Nilai hemoglobin yang diharapkan adalah sebagai berikut:
Laki-laki: 13,5-16,5 g / dL (8.4-10.2mmol / L)
Perempuan: 12.1-15.1 g / dL (7.5-9.4mmol / L)


Namun, rentang di atas hanyalah referensi, dan mungkin tidak berlaku untuk setiap orang.

Konsultasikan dengan dokter Anda untuk kisaran yang sesuai untuk Anda.


Menggunakan Memori Meter

NESCO MultiCheck 1GCUHB Meter dapat secara otomatis menyimpan glukosa, kolesterol, asam urat dan hemoglobin hasil tes terbaru. Anda dapat meninjau hasil tes secara berurutan dari yang terbaru ke yang terlama. Jika memori penuh, hasil terlama dihapus ketika hasil terbaru ditambahkan. Memori tidak terpengaruh dengan mengganti / melepas baterai.

Tinjau Hasil Tes Glukosa Tersimpan

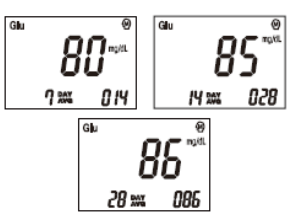


1. Silakan masukkan mode tes glukosa terlebih dahulu. Masukkan kunci kode glukosa (warna hijau) dan tekan tombol "M".
2. Menekan dan melepaskan tombol "M", rata-rata 7 hari, rata-rata 14 hari dan rata-rata 28 hari akan ditampilkan pada layar secara berurutan.
3. Setelah rata-rata 28 hari, hasil tes glukosa darah terbaru dengan tanggal akan ditampilkan melalui menekan dan melepaskan tombol "M".
4. Hasil yang disimpan dengan tanggal ditampilkan secara berurutan dari yang terbaru ke yang terlama melalui menekan dan

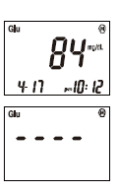

melepaskan tombol "M". Meteran akan mati secara otomatis dalam 3 detik ketika simbol "----" ditampilkan di layar.

5. Jika Anda memutuskan untuk berhenti memeriksa hasil, berhenti menekan tombol "M". Meteran akan mati secara otomatis atau dengan menekan tombol "S".
6. Tidak ada tes yang dapat dilakukan ketika Anda memeriksa hasil yang disimpan. Jika Anda ingin melakukan tes baru, silakan turunkan meteran terlebih dahulu dan mulai kembali langkah-langkah yang dijelaskan di bagian [Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Pengujian Hemoglobin].


Tinjau Hasil Tes Kolesterol Tersimpan

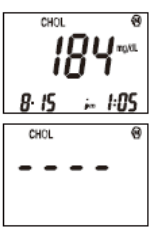

1. Silakan masukkan mode tes kolesterol terlebih dahulu. Masukkan kunci kode kolesterol (warna biru) dan tekan tombol "M".
2. Hasil yang disimpan dengan tanggal ditampilkan secara berurutan dari yang terbaru ke terlama melalui CHOL dengan menekan dan melepaskan tombol "M". Meteran akan mati secara otomatis dalam 3 detik ketika simbol "----" ditampilkan di layar.
3. Jika memutuskan untuk berhenti memeriksa hasil, berhenti menekan tombol "M" Anda. Meteran akan mati secara otomatis atau dengan menekan tombol "S".
4. Tidak ada tes yang dapat dilakukan ketika Anda memeriksa hasil yang disimpan. Jika Anda ingin melakukan tes baru, harap matikan meteran terlebih dahulu dan mulai kembali langkah-langkah yang dijelaskan dalam bagian (Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin Pengujian).

Tinjau Hasil Tes Asam Urat Tersimpan




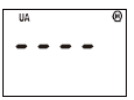

1. Silakan masuk ke mode tes asam urat terlebih dahulu. Masukkan kunci kode asam urat (warna oranye) dan tekan tombol "M".
2. Hasil yang disimpan dengan tanggal ditampilkan secara berurutan dari yang terbaru ke terlama melalui menekan dan melepaskan tombol "M". Meter akan mati secara otomatis dalam 3 detik ketika simbol "----" ditampilkan pada layar.
3. Jika Anda memutuskan untuk berhenti memeriksa hasil, berhenti menekan tombol "M". Meteran akan mati secara otomatis atau dengan menekan tombol "S".
4. Tidak ada tes yang dapat dilakukan ketika Anda memeriksa hasil yang disimpan. Jika Anda ingin melakukan tes baru, harap matikan meteran terlebih dahulu dan mulai kembali langkah-langkah yang dijelaskan dalam bagian (Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin Pengujian).

Tinjau Hasil Tes Hemoglobin Tersimpan



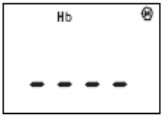

1. Silakan masuk ke mode uji hemoglobin terlebih dahulu. Masukkan kunci kode hemoglobin (warna merah muda) dan tekan tombol "M".
2. Hasil yang disimpan dengan tanggal ditampilkan secara berurutan dari yang terbaru ke yang terlama melalui menekan dan melepaskan tombol "M". Meteran akan mati secara otomatis dalam 3 detik ketika simbol "----" ditampilkan di layar.
3. Jika Anda memutuskan untuk berhenti memeriksa hasil, berhenti menekan tombol "M". Meteran akan mati secara otomatis atau dengan menekan tombol "S".
4. Tidak ada tes yang dapat dilakukan ketika Anda memeriksa hasil yang disimpan. Jika Anda ingin melakukan tes baru, harap matikan meteran terlebih dahulu dan mulai kembali

langkah-langkah yang dijelaskan dalam bagian (Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin Pengujian).

Menghapus Memori Stored Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin Hasil Tes

1. Ketika hasil tes glukosa darah / kolesterol / asam urat / hemoglobin terbaru ditampilkan, tekan tombol "S" selama 3 detik. Hasil tes glukosa darah / kolesterol / asam urat / hemoglobin terbaru dihapus segera setelah Anda mendengar suara "Bip" dari meteran.
2. Hasil yang disimpan dapat dihapus secara berurutan dari yang terbaru ke yang terlama melalui tombol "S" selama 3 detik.
3. Jika Anda memutuskan untuk berhenti menghapus hasil, berhenti menekan tombol "S". Meteran dapat secara otomatis mati atau melalui menekan tombol "S".

Merawat Meteran Anda

Memelihara Meter

- Jangan jatuhkan, pukul atau hancurkan meter Anda.
- Pertahankan meteran Anda antara 14 ° F dan 140 ° F (-10 ° C dan 60 ° C) dan di bawah 95% kelembaban relatif. Jangan menyimpan meteran di area seperti dapur, kamar mandi, ruang cuci atau mobil.
- Jauhkan meter dari air.
- Jangan menggunakan larutan pembersih kaca / rumah tangga untuk membersihkan meteran. Cukup gunakan alas alkohol untuk menyeka permukaan meteran, tetapi jangan menyeka slot strip uji atau slot kode kunci.
- Jangan membongkar meteran
- Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi Layanan Pelanggan atau penyedia layanan kesehatan Anda

Penggantian Baterai

Ketika simbol "⊟+" ditampilkan di layar, harap segera ganti baterai.

1. Geser penutup baterai dari bagian belakang meter.
2. Keluarkan baterai lama dan masukkan 2 baterai ukuran AAA baru (1.5V) ke dalam kompartemen baterai.
3. Geser tutup baterai kembali dan nyalakan meter Anda

Membersihkan Meteran

Anda dapat membersihkan meteran dengan swab alkohol isopropil 70%

PERHATIAN:

- JANGAN menyemprotkan larutan pembersih langsung ke meteran.
- JANGAN meredam slot kunci kode atau slot strip uji.
- JANGAN merendam meter dalam cairan

Panduan mengatasi masalah

Simbol	Permasalahan	Tindakan
	Suhu lingkungan terlalu tinggi untuk melakukan tes.	Ulangi tes di tempat yang dingin sekitar 57,2 ° F-104 F (14 ° C-40 ° C). Anda mungkin perlu menunggu selama 20 menit agar meteran dingin sebelum melakukan pengujian lagi.
	Jika hasil tes di atas 240 mg / dL, hasil tes glukosa darah dengan saran untuk memeriksa kadar keton Anda	Periksa ulang kadar glukosa darah Anda. Ikuti instruksi ahli kesehatan Anda mengenai pengujian keton.
	Tingkat glukosa darah Anda lebih tinggi dari 600 mg / dL (33,3 mmol / L). Hasil tes glukosa darah dengan saran untuk memeriksa kadar keton Anda	Periksa kembali kadar glukosa darah Anda. Jika "HI" ditampilkan lagi, segera hubungi dokter Anda.
	Tingkat glukosa darah Anda lebih rendah dari	Periksa kembali kadar glukosa darah Anda. Jika "LO"

	20 mg / dL (1.1mmol / L).	ditampilkan lagi, segera hubungi dokter Anda.
	Tingkat kolesterol darah Anda lebih tinggi dari 400 mg / dL (10,4 mmol / L).	Periksa kembali kadar kolesterol darah Anda. Jika "HI" ditampilkan lagi, segera hubungi dokter Anda.
	Tingkat kolesterol darah Anda lebih rendah dari 100 mg / dL (2,6 mmol / L).	Periksa kembali kadar kolesterol darah Anda. Jika "LO" ditampilkan lagi, segera hubungi dokter Anda.
	Tingkat asam urat darah Anda lebih tinggi dari 20 mg / dL (level 1190. U mol / L)	Periksa kembali asam urat darah Anda. UA Jika "HI" ditampilkan -HI- lagi, hubungi dokter Anda segera.
	Tingkat asam urat darah Anda lebih rendah dari 3 mg / dL mol / L). (179 µmol / L)	Periksa kembali kadar asam urat darah Anda. Jika "LO" ditampilkan lagi, segera hubungi dokter Anda
	Tingkat hemoglobin darah Anda lebih tinggi dari 26 g / dL | (16.1mmol / L).	Periksa kembali darah Hemoglobin Anda. Jika "HI" ditampilkan lagi, segera hubungi dokter Anda.
	Tingkat hemoglobin darah Anda lebih rendah dari 7 g / dL (4.3mmol / L).	Periksa kembali kadar Hb Hemoglobin darah Anda. Jika "LO" ditampilkan lagi, segera hubungi dokter Anda.
	Prosedur operasi salah. Strip uji telah digunakan atau meter tidak berkinerja dengan benar	Ulangi tes dengan strip tes baru, Jika simbol ditampilkan lagi, hubungi Layanan Pelanggan
	Hasil tes glukosa / kolesterol / asam urat / hemoglobin tertua * yang disimpan dalam memori muncul. Meteran akan mati secara otomatis setelah 3 detik.	Tidak diperlukan Tindakan
	1. Menggunakan kunci kode yang salah atau kunci kode dimasukkan dengan tidak benar.	1. Periksa kunci kode. Pastikan kunci kode dimasukkan ke dalam slot kunci kode sepenuhnya.

	2. Meter baru belum kode.	2. Masukkan kunci kode.
E02	Kunci kode rusak.	Hubungi Layanan Pelanggan.

Spesifikasi

NESCO MultiCheck 1GCUHB sistem pemantauan multi-fungsi

Fungsi	Glukosa	Kolesterol	Asam urat	hemoglobin
Rentang pengukuran	20 - 600mg/dL (1.1 – 33.3 mmo/L)	100 - 400mg/dL (2.6 – 10.4 mmo/L)	3 - 20mg/dL (179 – 1190 µmo/L)	7 - 26g/dL (4.3 – 16.1 mmo/L)
Kalibrasi	Setara plasma			
Waktu Tes	10 detik	150 detik	20 detik	6 detik
Kapasitas penyimpanan	200 hasil test	*50/100 hasil test	*50/100 hasil test	*50/100 hasil test
kondisi operasi suhu kelembaban	57.2 – 104^{0}F (14 – 40^{0}C) ≤ 85% kelembaban relative			
kondisi penyimpanan meter (kondisi transportasi) suhu kelembaban	14 – 140^{0}F (-10 – 60^{0}C) ≤ 95% kelembaban relative			
volume sampel	≥ 4 µl	≥ 15 µl	≥ 4 µl	≥ 2.6 µl
Tipe sampel	seluruh darah kapiler jari			
rentang hematokrit	30 – 55%			
Sumber daya listrik	1.5V (AAA) x 2			
Ukuran meter (PxLxT)(mm)	88 x 64 x 22			
Layar	Layer LCD (35 x 45mm)			
Berat	59grm, tanpa battre			
Masa pakai batter	Lebih dari 1000 X			
Teknology yang di pakai	Elektroda berbasis biosensor			

- Akan ada 100 hasil tes kenangan untuk pengukur fungsi ganda atau pengukur fungsi tunggal.
- Akan ada 50 hasil tes kenangan untuk pengukur tiga fungsi.
- Meteran telah aman dan EMC diuji dan disetujui sesuai dengan persyaratan untuk EN 61010-1 / EN 61010-2-101 / EN60601-1-2 / EN61326.

Layanan pelanggan

Terima kasih telah memilih Sistem Pemantauan NESCO MultiCheck 1 Multi Fungsi Glukosa Darah / Kolesterol / Asam Urat / Hemoglobin. Kernel Int'l Corp. merasa terhormat untuk menghadirkan produk baru ini kepada Anda. Layanan pelanggan kami meliputi:

1) Pelanggan kami berhak mendapatkan perbaikan dan penggantian suku cadang gratis. Jika Anda memiliki masalah dengan produk, silakan hubungi distributor / agen lokal untuk informasi lebih lanjut. Namun kerusakan berikut akibat dari penggunaan yang tidak benar atau kecelakaan tidak termasuk (seperti menghancurkan, kelembaban, perbaikan yang tidak sah, membongkar, dan bencana alam).
2) Kernel Int'l Corp tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan penyakit yang memburuk yang diakibatkan oleh penggunaan yang tidak benar dari pembeli / pengguna perangkat tanpa instruksi dari para profesional (mis. Tenaga medis). Konsumen tidak dapat meminta kompensasi dalam hal ini.
3) Silakan baca manual ini dengan seksama sebelum menggunakan sistem pemantauan ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi distributor setempat.

Pelabelan dan Informasi

	perhatikan penggunaan kembali		Konsultasikan instruksi untuk digunakan
	Keterbatasan suhu		Jauhkan dari sinar matahari
	Pabrikan		Digunakan oleh
	Perhatian, bacalah dokumen yang menyertainya	EC REP	Perwakilan resmi di Komunitas Eropa
LOT	Kode batch	REF	Nomor katalog
SN	Nomor seri	CONTROL	Kontrol
IVD	Perangkat diagnostik in vitro	STERILE R	Disterilkan menggunakan iradiasi
	Tetap kering		